

- Garantiza una repetibilidad y precisión perfectas para sus análisis CCF
- Pulverización en zonas precisas predefinidas por el operador
- Perfecta regularidad de la forma del chorro
- Ausencia casi total de formación de aerosoles
- Pulverización de hasta 4 reactivos en una placa
- Reduce significativamente el consumo de reactivos
- Apto para todos los reactivos habituales
- Sistema de enjuague automático
- Funcionamiento autónomo o controlado por PC, intuitivo
- Protección y seguridad del usuario
- Cumple los requisitos de GMP/GLP
- Para cualquier placa CCF/CCFAR de hasta 200 x 200 mm




El ChromaJet DS20 es un pulverizador controlado por microprocesador para transferir los reactivos de derivatización a las placas CCF/CCFAR.

Las ventajas frente a la pulverización manual son una cantidad de reactivo significativamente reducida, un patrón de pulverización muy uniforme y la evitación de la formación de aerosoles. La aplicación de los reactivos se realiza con la máxima precisión y es reproducible en todo momento. Este dispositivo, que permite realizar operaciones de CCF de acuerdo con las prescripciones GLP, protege la salud del usuario contra cualquier riesgo químico (inhalaciones y salpicaduras). El ChromaJet DS20 puede funcionar de forma autónoma o conectado a un PC. Con un software especial, se pueden crear, guardar y cargar diferentes métodos de pulverización.



*Soporte para botellas de reactivos*

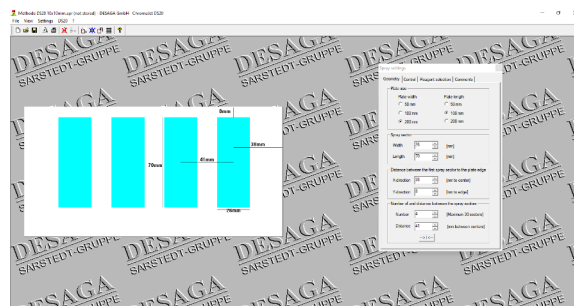

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Área de derivatización:	200 x 200 mm
Velocidad del chorro:	50 - 200 mm/s
Ciclo de pulverización:	1 - 5
Rejilla de pulverización:	2 - 4 mm en pasos de 0,1 mm
Caudal de aire:	70 - 100
Caudal de reactivo:	50 - 240 s/mL
Velocidad de llenado, velocidad de aclarado:	6 - 30 s/mL
Operación de enjuague:	1 - 5
Dimensiones (An x Al x P):	440 x 405 x 275 mm
Peso:	15 kg



*Boquilla de pulverización*

## REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción
BS130.700	ChromaJet DS20, pulverizador de reactivos, 230 V, incl. 1 paquete de 50 tubos de 40 mL, software
BS130.701	ChromaJet DS20, pulverizador de reactivos, 110 V, incl. 1 paquete de 50 tubos de 40 mL, software
BS130.720	Filtro, 1 paquete de 20 piezas
BS130.725	Documentos IQ/OQ para ChromaJet DS20
BS.63796	Tubos con base plana, tapón de rosca, 40 mL, 1 paquete de 50 uds.
BS130.732	Manguera de escape, vitón con conector, 2,50 m

*Cambios técnicos reservados. Bionis no se hace responsable de las erratas, errores que puedan dar lugar a pérdidas, reclamaciones o costes.*

